

SMART II New

Instrukcja obsługi



Dostępny kolor czerwony materiał zamszowy lub czarna skóra syntetyczna wysokiej klasy.

GRATULACJE!

Dokonując zakupu tego fotela masującego pokazaliście Państwo, że myślicie o swoim zdrowiu. Abyście mogli Państwo długo cieszyć się zaletami tego systemu, prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, a następnie ich przestrzeganie.

Życzymy Państwu, aby wasz osobisty SMART II przyniósł wam wiele radości

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Proszę uważnie przeczytać poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zanim zaczniecie Państwo korzystać z fotela masującego w którejś z jego funkcji. Jeżeli dotyczą Państwa wymienione poniżej schorzenia, proszę skontaktować się ze swoim lekarzem, zanim zaczniecie Państwo używać fotela.

W przypadku:

- Ciężkiej choroby,
 - Choroby serca,
 - Osteoporozy,
 - Ciąży,
 - Nowotworu złośliwego,
 - Zaburzeń postrzegania świadomości
 - Trwającego leczenia,
 - Niepełnosprawności
-
- UWAGA! W celu uniknięcia wypadku, nie dotykać palcami głowic masujących
 - Samodzielne otwieranie fotela jest surowo odradzane ze względów bezpieczeństwa.
 - Jeśli w trakcie korzystania z fotela, pojawią się dolegliwości, należy natychmiast skorzystać z porady lekarza.
 - W celu uniknięcia porażenia prądem lub zranienia, nie należy pozwalać, aby dzieci obsługiwały fotel bez nadzoru.
 - Nie należy używać i przechowywać fotela w miejscach, gdzie będzie narażony na działanie wody lub wysokiej temperatury.
 - Nie należy używać uszkodzonych wtyczek, kabli lub gniazdek. Uszkodzone kable lub wtyczki muszą zostać wymienione przez producenta, serwisanta lub wykwalifikowany personel.
 - Należy unikać przeciągania, zginania lub chodzenia po fotelu. Nie należy go obciążać dużymi ciężarami.
 - Aby uniknąć porażenia prądem, śpięcia lub pożaru, należy, po użyciu lub długim nie używaniu upewnić się, że fotel jest odłączony od prądu.
 - Jeśli nastąpi awaria fotela, należy natychmiast odłączyć go od prądu.
 - Należy unikać dotykania wtyczki mokrymi rękami.
 - Nie należy używać fotela bezpośrednio po jedzeniu, ponieważ może to spowodować nudności.
 - Aby uniknąć nadmiernego podrażnienia mięśni i układu nerwowego, nie należy przekraczać zalecanego czasu masażu 30 minut.

Wskazówki medyczne

Jeżeli Państwa lekarz/ortopeda nie odradził Państwu wprost masażu, możecie bez problemu korzystać z masażu z funkcji fotela masującego.

Masaże są intensywniejsze, jeżeli fotel jest ustawiony w pozycji leżącej. Zaleca się na początku stosować masaże w pozycji siedzącej.

Masaż nigdy nie powinien być odbierany jako nieprzyjemny.

Zbyt intensywne masaże mogą szkodzić ciału.

Kobiety w ciąży, osoby chore oraz dzieci nie powinny korzystać z fotela. W przypadku uszkodzenia kręgosłupa lub po zabiegu operacyjnym, masaże mogą być szkodliwe. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji

Zakupiliście Państwo produkt wytworzony z materiałów wysokiej jakości. Wymaga on odpowiedniej pielęgnacji. Należy unikać wystawiania fotela na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wilgoci. Należy regularnie stosować zalecane środki do pielęgnacji, tak aby długo cieszyć się fotelem.

Zasady gwarancji

Sprzedawca udziela na powyższy produkt gwarancji na okres przewidziany ustawowo. Okres obowiązywania liczy się od daty zakupu. Data zakupu jest potwierdzona dowodem zakupu.

Sprzedawca bezpłatnie wymieni lub naprawi produkty wyprodukowane na terenie Niemiec. Nie dotyczy to części, które się zużywają, np. pokryć z materiału. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest przesłanie wadliwego towaru oraz dowodu zakupu przed upływem okresu gwarancji.

Naprawa w ramach gwarancji nie przysługuje, jeśli wada powstała z powodu np. działania czynników zewnętrznych lub w wyniku naprawy lub zmian przeprowadzonych przez inne osoby niż producent lub autoryzowany przedstawiciel.

Gwarancja udzielana przez sprzedawcę jest ograniczona do naprawy, ew. wymiany produktu. W ramach niniejszej gwarancji, sprzedawca ani producent nie ponoszą żadnej dodatkowej odpowiedzialności i nie są odpowiedzialni za szkody wynikłe z nieprzestrzegania tej instrukcji obsługi lub/oraz nieodpowiedniego używania produktu. Jeżeli po zbadaniu produktu okaże się, że reklamacja dotyczy wady nieobjętej gwarancją lub, że upłynął okres gwarancji, wtedy klient zostanie obciążony kosztami badania i naprawy.

Instalacja

Przed instalacją należy się upewnić, że napięcie w sieci jest zgodne z napięciem podanym na wtyczce. Jeśli nic się jeszcze nie dzieje, należy włożyć kabel od prądu do tylnej części fotela masującego i włożyć wtyczkę do kontaktu.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 220-240 V / 50Hz

Moc znamionowa: 120 W

Wymiary : H: 114, T: 85, B: 75,5 cm (H - wysokość / T - długość / B - szerokość)

Długość po rozłożeniu samego fotela 130 cm + 35 cm podnózek

Maks kąt rozłożenia oparcia : 175°

Waga brutto : 53kg

Limity czasu masażu : automat 20 Minut / ręczny : 30 Minut

Cechy masażu fotela Smart :

- * najnowocześniejsza metoda masażu w połączeniu 3 technik jednocześnie (żaden fotel niema takiego systemu) - ugniatanie + ostukiwanie + rolowanie w tym samym czasie ! (tego nie potrafi żaden masażysta na świecie).
- * kompaktowa wersja profesjonalnego urządzenia do relaksacji 100 cm x 73 cm x 95 cm
- * technologia masażu Shiatsu ! (nowy cykl programu)
- * 3 automatyczne programy ~+ 4 ręczne (Shiatsu, oklepywanie, rolowanie, uciskanie)
- * sterowanie z pilota w budowany w podłokietnik !!!
- * bezstopniowe ustawienie oparcia (skala 105-175 stopni odchylenia)
- * własne ustalenia : siły masażu, zasięgu masażu (długość - szerokość !)
- * bardzo wysokiej jakości wykonanie (obicie , stelaż i wykończenia) Szyny profilowane i modelowane pod kręgosłup. Bardzo mocny silnik sprawiający niebywale doznania. Ręczne ustawienie masażu pod swoje parametry ciała za pomocą dwóch przycisków.
- * specjalistyczny podnózek do masażu łydek lub stóp o wysokich walorach zdrowotnych przeciw zmęczeniu nóg i stóp
- * specjalny system multimedialny - music synchro z głośnikami zabudowanymi w fotel + wzmacniacz systemu stereo o wysokiej jakości dźwięku. (wystarczy podłączyć każdy player MP3/Mp4)

Zalety : bardzo cichy i precyzyjny mechanizm z łączeniem technik (brak w innych modelach !), piękny design, wysoka jakość użytych materiałów, szybki i nowoczesny procesor, małe rozmiary, system głośników JBL, pilot w podłokietniku z możliwością wyciągania, zaawansowane sterowanie i funkcje.






ZA POMOCĄ PILOTA MOŻNA STEROWAĆ NASTĘPUJĄCYMI FUNKCJAMI

- Ugniatanie, uklepywanie, rolowanie od ramion do ud, w połączeniu z trzema programami, które masują dolną, górną część pleców lub całe plecy. Dodatkowo można skorzystać z funkcji, dzięki której masaż odbywa się w rytmie muzyki.
- Według potrzeby można wszystkie funkcje włączać osobno, dobierając różne poziomy intensywności, lub wybrać część ciała, która ma być masowana.
- W siedzisku można ustawić dwa poziomy wibracji

Masaż kilkoma technikami jednocześnie. Fotel wyposażony jest w profesjonalny system mechaniczny z dwoma niezależnymi silnikami. Programy masażu są niepowtarzalne w żadnym innym fotelu, co czyni go atrakcyjnym na rynku. Zaawansowana technika Shiatsu (auto) i możliwość wyboru ręcznego wszelkich ustawień jak : wysokość masażu , intensywność masażu, szerokość rolek masujących i ustawienie masażu w danym punkcie w oparciu (np. jak chcemy masować sobie tylko barki lub lewy bark). Fotel rozkłada się do pozycji półleżącej a sterowanie jest z zamontowanego pilota w podłokietniku. Smart świetnie nadaje się do salonów , gabinetów i różnego rodzaju poczekalni z uwagi na średnie gabaryty. Idealny do małych pomieszczeń, gdzie chcielibyśmy mieć swój kącik dla odpoczynku i relaksu a nie w sposób by było wstawić duży fotel.

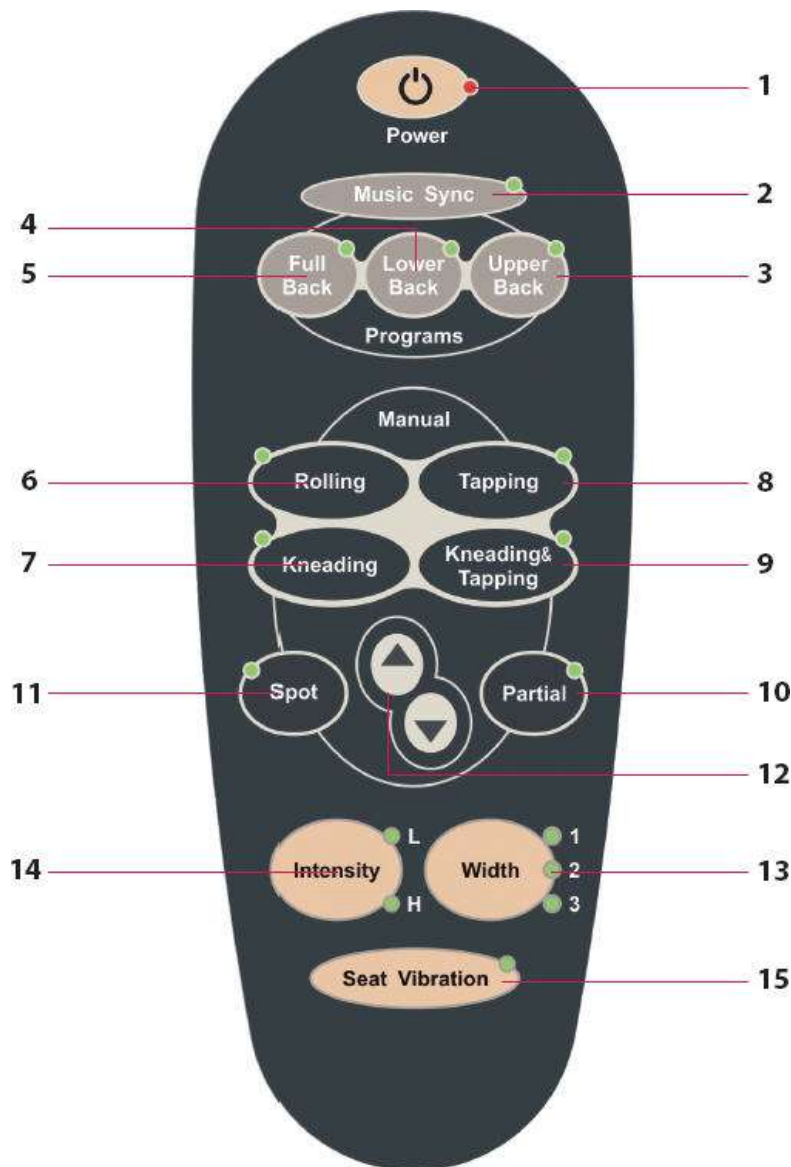

(1) Włącz / Wyłącz fotel masujący (Power)

Rolki przy włączaniu / włączaniu zawsze ustawiają się w pozycji początkowej

(2) Synchronizacja z muzyką (Music Sync)

Funkcja „synchronizacja z muzyką” ustawia masaż do rytmu muzyki z urządzenia podłączonego do gniazda wejścia.

(3) Włącz / Wyłącz program Górna część pleców (Upper Back ON/OFF)

Program Górna część pleców przeprowadza masaż górnej części pleców.

(4) Włącz / Wyłącz program Łędźwiowa część pleców (Lower Back ON/OFF)

Program Łędźwiowa część pleców przeprowadza masaż łędźwiowej części pleców.

(5) Włącz / Wyłącz program Całe plecy (Full Back ON/OFF)

Przy odpowiedniej zmianie funkcji, program całe plecy masuje całe plecy

(6) Włącz / Wyłącz rolowanie (Rolling ON/OFF)

Funkcje dodatkowe:
Tryb częściowy (10) i rozstawienie rolek(13)

(7) Włącz / Wyłącz ugniatanie (Kneading ON/OFF)

Funkcje dodatkowe:
Tryb punktowy (11), Intensywność (14) i tryb częściowy (10)

(8) Włącz / Wyłącz uklepywanie (Tapping ON/OFF)

Tryb punktowy (11), Intensywność (14) i tryb częściowy (10)

(9) Włącz / Wyłącz ugniatanie i uklepywanie (Kneading & Tapping ON/OFF)

ON/OFF)

Tryb punktowy (11), Intensywność (14) i tryb częściowy (10)

(10) Włącz / Wyłącz tryb częściowy (Partial ON/OFF)

Po użyciu tego przycisku, rolki pozostają na wysokości wybranego odcinka pleców

(11) Włącz / Wyłącz tryb punktowy (Spot ON/OFF)

Po użyciu tego przycisku, rolki wykonują masaż punktowy tylko wybranego miejsca

(12) Podnieś / opuść rolki

Aby można było samodzielnie podnosić / opuszczać rolki, tryb punktowy musi być aktywowany

(13) Rozmieszczenie rolek (Width)

Rozmieszczenie rolek w stosunku do kręgosłupa może być ustawione w trzech poziomach

(14) Intensywność (Intensity)

NISKA i WYSOKA (LOW and HIGH)

(15) Wibracje w siedzisku (Seat Vibration)

Po jednym naciśnięciu przycisku włączone zostają wibracje w siedzisku, po dwóch wibracje następują w krótkich odstępach, po trzech zostają wyłączone

time to relax

WITH CASADA

SYNCHRONIZACJA Z MUZYKĄ



(1) Synchronizacja z muzyką (Music Sync)

(2) Głośniki i przechowywanie

(3) Wejście typu 'Jack' do podłączenia sprzętu grającego (player MP3 i inne)

Aby móc korzystać z funkcji synchronizacji z muzyką potrzebny będzie np. odtwarzacz MP3. Przy użyciu załączonego kabla można go podłączyć o wejścia (patrz punkt **(3)**). Następnie należy pamiętać o włączeniu funkcji synchronizacja z muzyką (patrz punkt **(1)**). Teraz należy włączyć odtwarzacz MP3. Program przetworzy rytm muzyki w rytm masażu. Muzyki można słuchać przez wbudowane głośniki lub słuchawki.



Certyfikaty / Atesty bezpieczeństwa:

CMS-605/ CMS-606 Smart

folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

EMC directive (89/336/EEC amended by 93/68/EEC)

Angewendete harmonisierte europäische Normen:

EN55013:2001/+A1:2003EN 55104-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 55020:2002/+A1:2003

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005